


Alioth 超滤膜包夹具

316L不锈钢

操作简便

医药级标准

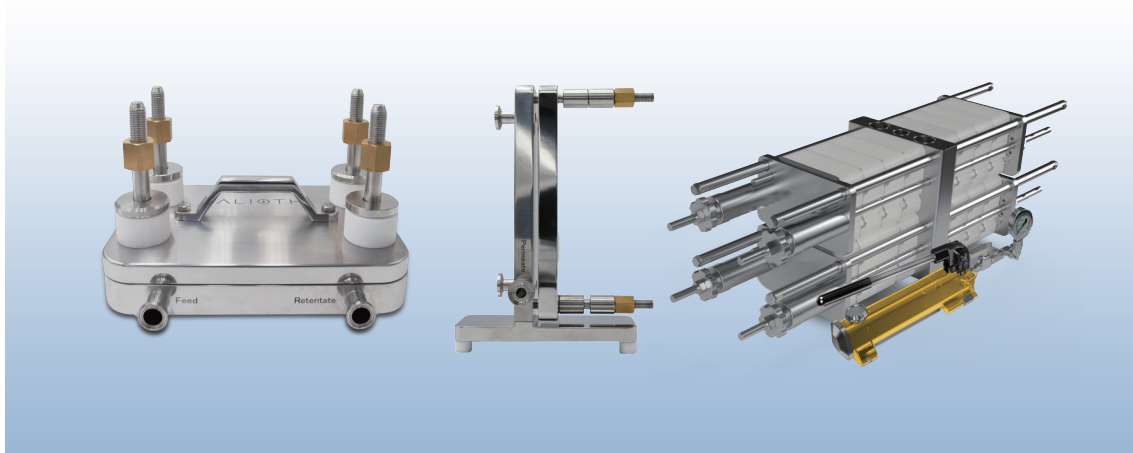

产品介绍

艾里奥斯超滤膜包夹具是常见用于超滤工艺应用中的产品，用于夹持特定面积的超滤膜包，借助特定的动力源，使得料液通过超滤膜，实现目标物质截留的目的。

316L不锈钢材质，可很好的适应不同特点的料液，满足制药行业的特殊需求。同时可以兼容市场上常见的板式超滤膜包。可提供从研发到生产级别的全规格系列，也可与不同品牌的超滤系统进行搭配、整合与使用。

产品特性

- 不锈钢316L材质
- 与料液接触面 $Ra < 0.6 \mu m$
- 符合cGMP对医药级标准的结构设计卫生死角的隔膜阀和压力表
- 椭圆形进口流道设计，减少操作过程中的系统压力损失
- 可兼容市场主要品牌的超滤膜包
- 可提供实验室研发规模、临床生产中试规模、商业化大生产规模全规格系列
- 可耐受酸、碱、有机溶剂等，满足SIP/CIP以及清洁验证需求
- 采用行业标准的卡盘接口连接
- 可根据客户需求做特殊定制

产品文件包

- CoQ
- 产品基础图纸
- 维护指南和操作手册
- 仪表的校验合格证书
- 材质证明文件
- 表面光洁度证明文件
- IQ/OQ验证服务和文件
- 备品备件清单文件
- 其他定制产品涉及的定制文件

产品特性

- 单抗、重组蛋白、疫苗、血液制品、脂质体、小分子等药品生产工艺中的纯化步骤
- 可完成浓缩、透析、缓冲液置换、脱盐、纯化、除热原、澄清等工艺过程

Alioth 超滤膜包夹具

✚ 订购信息

产品货号	产品描述	产品包装
TFHPR0A1-1	超滤膜包夹具0.1平	1/PK
TFHPR0A1-2	超滤膜包夹具0.1平套装 (包括夹具, 扭力扳手, 压力表, 隔膜阀, 三通, 卡箍, 密封圈等)	1/PK
TFHPR0A5-1	超滤膜包夹具0.5平	1/PK
TFHPR0A5-2	超滤膜包夹具0.5平套装 (包括夹具, 扭力扳手, 压力表, 隔膜阀, 三通, 卡箍, 密封圈等)	1/PK
TFHPR2A5-1	超滤膜包夹具2.5平	1/PK
TFHPR2A5-2	超滤膜包夹具2.5平套装 (包括夹具, 扭力扳手, 压力表, 隔膜阀, 三通, 卡箍, 密封圈等)	1/PK
TFHPR2A5-ET51	超滤膜包夹具2.5平带延长杆, 可兼容5平	1/PK
TFHPR2A5-ET52	超滤膜包夹具2.5平带延长杆, 可兼容5平, 套装 (包括夹具, 扭力扳手, 压力表, 隔膜阀, 三通, 卡箍, 密封圈等)	1/PK
TFHPR5A0-1	超滤膜包夹具5平	1/PK
TFHPR5A0-2	超滤膜包夹具5平套装 (包括夹具, 扭力扳手, 压力表, 隔膜阀, 三通, 卡箍, 密封圈等)	1/PK
TFHPR10A-1	超滤膜包夹具10平	1/PK
TFHPR20A-1	超滤膜包夹具20平	1/PK