


Alioth 深层过滤膜包夹具 M 款

易于使用

线性放大

符合制药行业要求

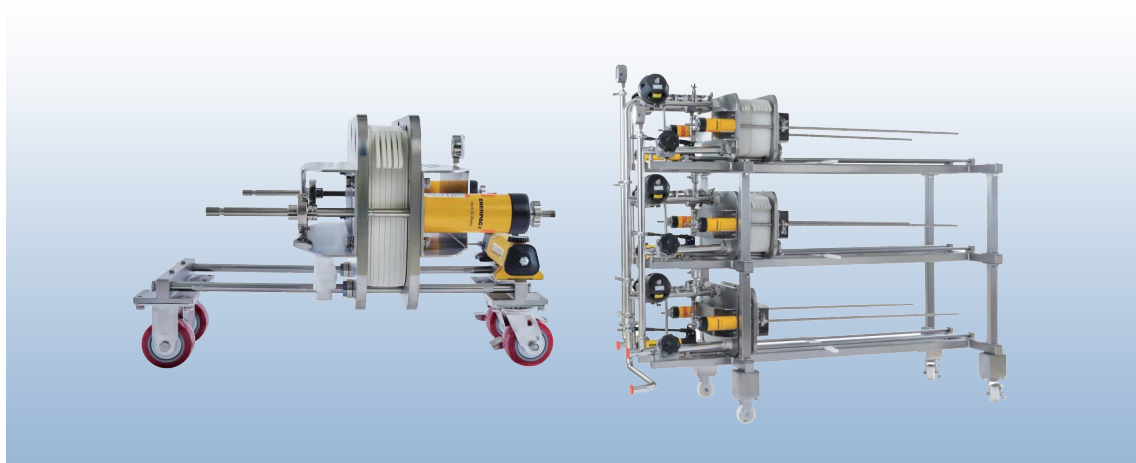

产品介绍

艾里奥斯深层膜包夹具M款常用于夹持特定面积的深层膜包，借助特定动力源，使料液通过深层过滤器实现料液杂质分离的目的。搭配艾里奥斯出品的深层过滤器，可支持不同规模的生产使用需求。316L不锈钢材质，很好的满足制药行业的需求。设备简单，结构坚固，便于安装和使用，还可兼容常见的其他品牌板式深层膜包。

产品特性

- 不锈钢316L材质
- 表面光洁度 $Ra < 1.2 \mu m$ ，接液面光洁度 $Ra < 0.6 \mu m$
- 符合cGMP对医药级标准的结构设计卫生死角的隔膜阀和压力表
- 配置不锈钢管路，也可兼容一次性管路
- 配置液压装置，安装膜包，操作省力，安全简便
- 可兼容市场主要品牌的深层膜包
- 可提供实验室研发规模、临床生产中试规模、商业化大生产规模全规格系列
- 可耐受酸、碱、有机溶剂等，满足SIP/CIP以及清洁验证需求
- 采用行业标准的卡盘接口连接
- 可根据客户需求做特殊定制

产品文件包

- CoQ
- 产品基础图纸
- 维护指南和操作手册
- 仪表的校验合格证书
- 材质证明文件
- 表面光洁度证明文件
- 液压油FDA证书
- 密封件2.2证书
- 过流件EN 10204证书
- IQ/OQ 验证服务和文件
- 备品备件清单文件
- 其他定制产品涉及的定制文件

产品配置

- 一次性接头连接艾里奥斯深层盒式滤器与工艺管线，形成一次性流路
- 一次性隔离板可使单层夹具上安装多于一种型号的滤器

产品应用

- 单抗药物生产工艺中的澄清步骤
- 重组蛋白药物生产工艺中的澄清步骤
- 疫苗生产工艺中的澄清步骤
- 血液制品生产工艺中的澄清步骤

Alioth 深层过滤膜包夹具 M 款

产品参数

规格	2.2 m ²	5.5 m ²	11 m ²	22 m ²	33 m ²
尺寸(长x宽x高)	81x64x51 cm	133x73x100 cm	196x73x100 cm	199x89x117 cm	195x89x157 cm
	103x64x51 cm	162x73x100 cm	223x73 x100 cm	203x89x117 cm	203x89x177 cm
	(含管道阀门款)	(含管道阀门款)	(含管道阀门款)	(含管道阀门款)	(含管道阀门款)
该数据供参考，尺寸详见图纸					
重量	110-120 kg	160-170 kg	180-190 kg	340-360 kg	480-500 kg
夹具挡板	SS 304				
接液部分	SS 316L				
表面光洁度	表面光洁度Ra<1.2 μm，接液面光洁度Ra<0.6 μm				
设备框架	SS 304				

订购参数

产品货号	产品描述	产品包装
DFHPRM2A2-1	深层夹具M款2.2平，带底部接液盘	1/PK
DFHPRM2A2-2	深层夹具M款2.2平，带底部接液盘，带阀门、压力表及管件	1/PK
DFHPRM5A5-1	深层夹具M款5.5平，带底部接液盘	1/PK
DFHPRM5A5-2	深层夹具M款5.5平，带底部接液盘，带阀门、压力表及管件	1/PK
DFHPRM11A-1	深层夹具M款11平，带底部接液盘	1/PK
DFHPRM11A-2	深层夹具M款11平，带底部接液盘，带阀门、压力表及管件	1/PK
DFHPRM22A-1	深层夹具M款22平，带底部接液盘	1/PK
DFHPRM22A-2	深层夹具M款22平，带底部接液盘，带阀门、压力表及管件	1/PK
DFHPRM33A-1	深层夹具M款33平，带底部接液盘	1/PK
DFHPRM33A-2	深层夹具M款33平，带底部接液盘，带阀门、压力表及管件	1/PK